



White Backrest for Seats and Chairs
White Backrest for Seats and Chairs, Photobox
Black Backrest for Seats and Chairs
Black Backrest for Seats and Chairs, Photobox

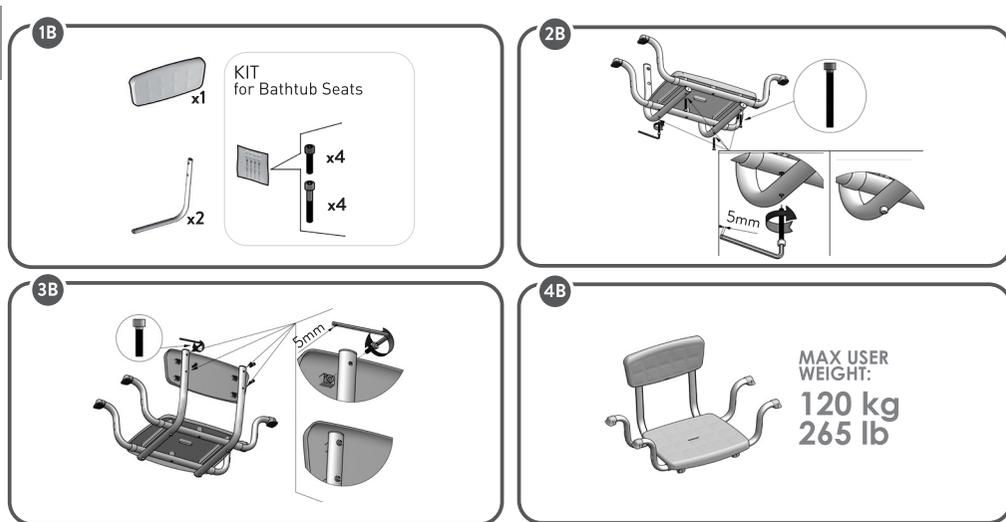

UM-KINGBR-KD Rev. 0 as of 2024/03

MADE IN ITALY

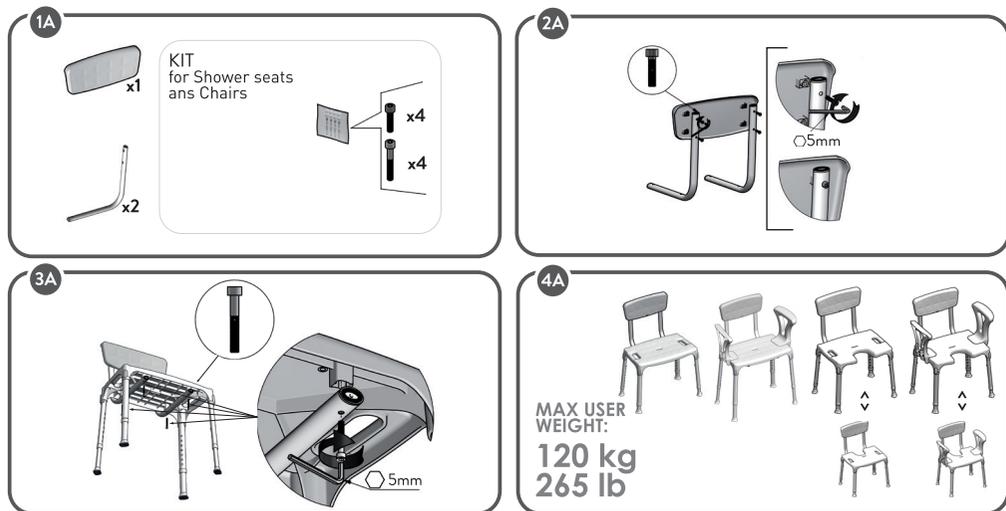

K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com

Schienale bianco per Sedute e Sedie
Schienale bianco per Sedute e Sedie, Photobox
Schienale nero per Sedute e Sedie
Schienale nero per Sedute e Sedie, Photobox



DESTINAZIONE D'USO:

Lo Schienale è un utile accessorio per sedute e sedie. Rende l'utilizzo del sedile più sicuro e confortevole, in quanto utile supporto per la schiena.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI:

I prodotti della linea Sedili da doccia sono un valido aiuto per gli anziani, per gli utilizzatori di sedia a rotelle, per le persone con ridotta mobilità della zona lombare, delle ginocchia e delle anche, e per tutti coloro che hanno difficoltà a mantenere una posizione eretta durante le fasi dell'igiene personale quotidiana nella doccia. L'utente deve avere autonomia di equilibrio durante i movimenti necessari per passare alla posizione seduta a eretta, nonché avere un'adeguata capacità a rimanere seduto. Si sconsiglia l'utilizzo del sedile da doccia nel caso in cui l'utilizzatore abbia problemi di equilibrio o percezione.

AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA:

- Il peso massimo dell'utente, indicato su queste istruzioni di montaggio, non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, l'utente deve verificare che il sedile da doccia sia assemblato correttamente e in posizione stabile.
- Il sedile da doccia può essere utilizzato solo su superfici libere da ostacoli.
- Durante il montaggio del prodotto, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Manuale d'uso.
- Può aumentare il rischio di lesioni alle dita durante le fasi di montaggio.
- Non dondolarsi durante l'uso del sedile da doccia; può essere causa di scivolamento, ribaltamento o cedimento delle gambe.
- Tenere sempre il sedile su 4 gambe.
- Non modificare in alcun modo il sedile da doccia e tutti i suoi componenti.
- Non utilizzare il sedile da doccia se danneggiato o alterato in qualsiasi maniera.
- Dopo l'utilizzo, il sedile da doccia deve essere rimosso dal piatto doccia per evitare eventuali ostruzioni.
- Non utilizzare la sedia da doccia per scopi diversi da quelli previsti.
- Il sedile da doccia non deve essere riposto all'aperto.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle procedure di pulizia e sanificazione. Al fine di garantire un utilizzo sicuro e adeguato a rispettare gli standard di igiene, è necessario che l'utente esegua queste procedure prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale sia del dispositivo che di tutti i suoi componenti e controllare il fissaggio delle viti.

Per la pulizia e sanificazione, è necessario attenersi alle seguenti procedure:

1. Indossare i guanti
2. Prima di procedere ad un'accurata sanificazione, rimuovere lo sporco evidente.
3. Utilizzare acqua o detersivi non aggressivi per la procedura di pulizia.
4. Pulire con un panno asciutto e pulito.

In alternativa, il prodotto può essere igienizzato in una lavastoviglie domestica alla massima temperatura. Il cuscino morbido deve essere lavato rigorosamente a mano.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:


Il prodotto è idoneo per essere riutilizzato da altri utenti. Prima di essere utilizzato da altri utenti, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, il prodotto deve essere controllato da rivenditori qualificati.

CORRETTA PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non smaltire il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:








Se si dovesse verificare un grave incidente che coinvolge questo dispositivo, contattare il produttore all'indirizzo e-mail info@kdesign-group.com e l'autorità competente del proprio paese.

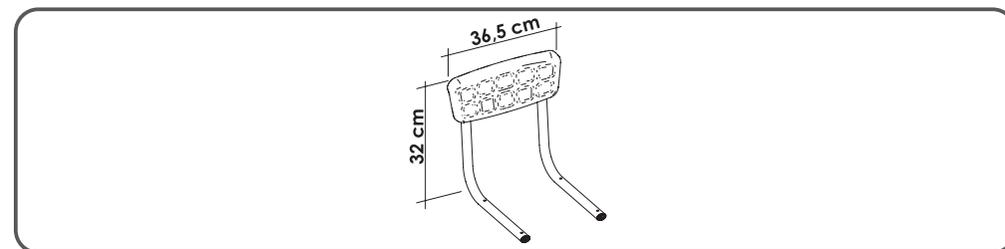

K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com

Schienale bianco per Sedute e Sedie
Schienale bianco per Sedute e Sedie, Photobox
Schienale nero per Sedute e Sedie
Schienale nero per Sedute e Sedie, Photobox

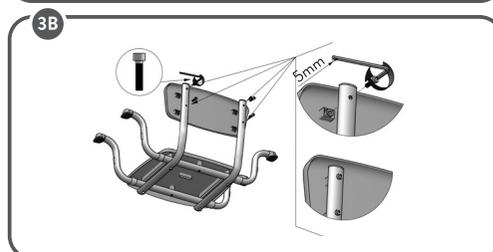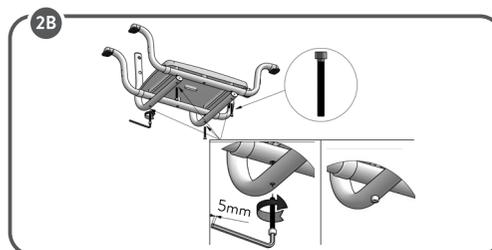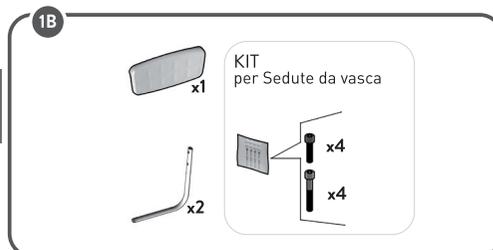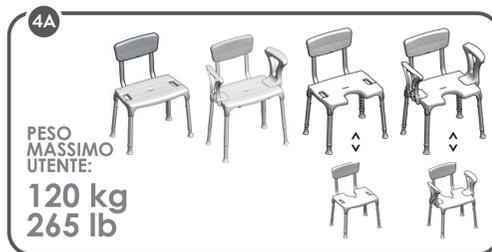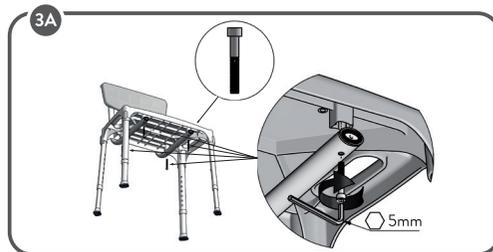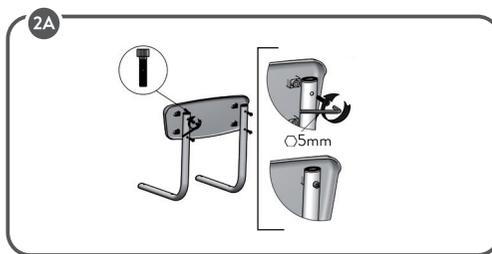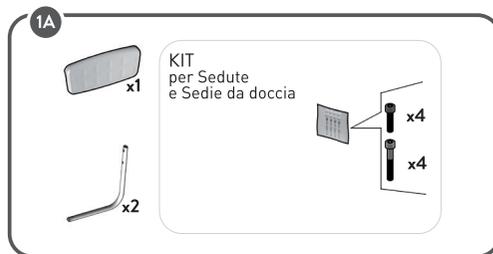

MADE IN ITALY



White Backrest for Seats and Chairs
White Backrest for Seats and Chairs, Photobox
Black Backrest for Seats and Chairs
Black Backrest for Seats and Chairs, Photobox

INTENDED USAGE:

The Backrest is a complementary accessory for seats and chairs. It acts as a back support for the user, making the seat safer and more comfortable.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The Shower Seat line products are aimed at elderly people, wheelchair users, people with reduced mobility of the lumbar, knee, or hip, and all those who have difficulty maintaining the standing position during the shower stages of daily personal hygiene. The user is required to have autonomy of balance during sitting and standing procedures as well as to have adequate ability to keep sitting. The shower seat must not be used if the user has problems related to balance or perception disorders.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceeded.
- Before every use, be sure the shower seat is correctly assembled in a stable position.
- The shower seat can be used only on surfaces free from obstacles.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting process.
- Do not swing on the shower seat; this may lead to slipping, overturning, or subsidence of the legs. Always keep the shower seat on its 4 legs.
- Do not modify the shower seat and its components in any way.
- Do not use the shower seat if damaged or altered in any way.
- After use, the shower seat should be removed from the tray to avoid obstruction.
- Do not use the shower seat for different purposes from the intended one.
- The shower seat must not be stored outdoors.

MAINTENANCE INFO:

Product maintenance consists of cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee safe use and an adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components, and the tightness of the screws must be checked. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before proceeding with the most accurate disinfection.
3. Use water or non-aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

Alternatively, the product can be cleaned in domestic dishwashers at the maximum temperature. The soft cushion must be cleaned strictly by hand.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reusing by others, the product must be correctly cleaned and sanitized. Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the regular household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose of it.

INCIDENT REPORTING:

If there was a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at info@kdesign-group.com and the responsible authority in your country.

