


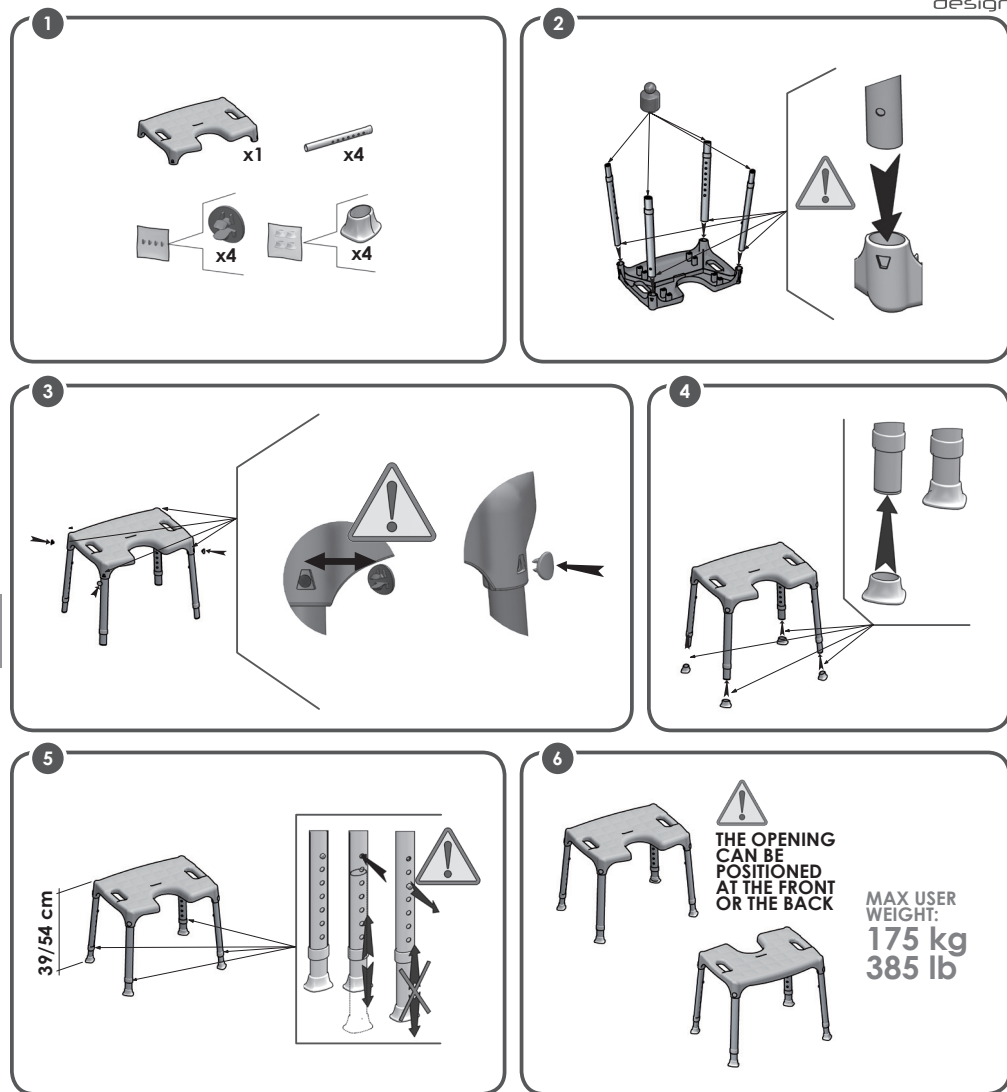

UM-KING5C-KD Rev. 3 as of 2022/04

MADE IN ITALY

**DESTINAZIONE D'USO:**

La sedia da doccia con apertura consente all'utente maggiore indipendenza durante l'utilizzo della doccia, riducendo la fatica muscolare dovuta alla posizione eretta così come rischi di scivolamento e lesioni. I piedini in gomma antiscivolo assicurano un'adeguata presa con il pavimento. La sedia da doccia può essere installata mantenendo le gambe ad altezze diverse: in particolare, le gambe anteriori possono essere settate ad un'altezza inferiore rispetto a quelle posteriori. Questo permette all'utente di mantenere una posizione più corretta durante la seduta e durante le fasi di alzata e di seduta. Per via della sua flessibilità, la sedia da doccia può essere posizionata anche su superfici irregolari, come quelle delle piatte doccia. L'apertura facilita l'igiene intima e può essere posizionata sia davanti che dietro. La sedia da doccia può essere maneggiata senza difficoltà grazie al suo peso contenuto.

INDICAZIONE E CONTROINDICAZIONI:

La sedia da doccia è pensata per anziani, utenti in sedia a rotelle, persone con mobilità ridotta di zona lombare, anche o ginocchia e a tutti coloro che possono avere difficoltà a mantenere la posizione eretta durante l'utilizzo della doccia. Durante l'uso è necessaria un'adeguata capacità di mantenere la seduta e di alzarsi e sedersi in autonomia. L'utilizzo della sedia da doccia non è raccomandato in caso di disturbi della percezione o problemi di equilibrio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Il peso massimo utente indicato nelle istruzioni non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi che la sedia da doccia sia assemblata correttamente e posizionata stabilmente.
- La sedia da doccia può essere posizionata solo su superfici libere da ostacoli.
- Durante l'assemblaggio, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale.
- Il rischio di lesioni alla dita potrebbe aumentare durante il processo di assemblaggio.
- Non dondolare sulla sedia, questo potrebbe causare lo scivolamento, ribaltamento o cedimento delle gambe. Mantenere la sedia sempre sulle sue 4 gambe.
- Non modificare la sedia da doccia e i suoi componenti in alcun modo.
- Non usare la sedia da doccia se danneggiata. Cricche e deformazioni potrebbero fortemente influire sull'utilizzo in sicurezza del dispositivo.
- Dopo l'utilizzo, la sedia da doccia deve essere rimossa dal piatto doccia per evitare ostruzioni.
- Non usare la sedia da doccia per fini differenti da quelli previsti.
- La sedia da doccia non deve essere riposta all'aperto.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle fasi di pulizia e igienizzazione. Per poter garantire un adeguato livello di igiene, l'utente deve ripetere queste operazioni prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti. Per le operazioni di pulizia e igienizzazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Indossare guanti.
2. Rimuovere lo sporco più evidente prima di procedere con la disinfezione più approfondita.
3. Usare acqua o un detergente non aggressivo per la pulizia.
4. Asciugare con un panno asciutto e pulito.

Alternativamente, il prodotto può essere igienizzato in una lavastoviglie domestica alla massima temperatura.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:


Il prodotto è idoneo al riutilizzo da parte di altri utenti. Prima del riutilizzo da parte di altri, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, deve essere controllato da rivenditori qualificati.


PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:

Se il dispositivo dovesse essere coinvolto in un incidente, contattare il produttore all'indirizzo info@kdesign-group.com e l'autorità competente del proprio paese.

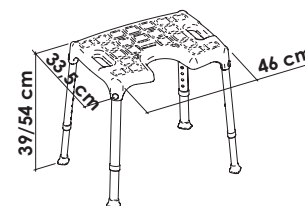

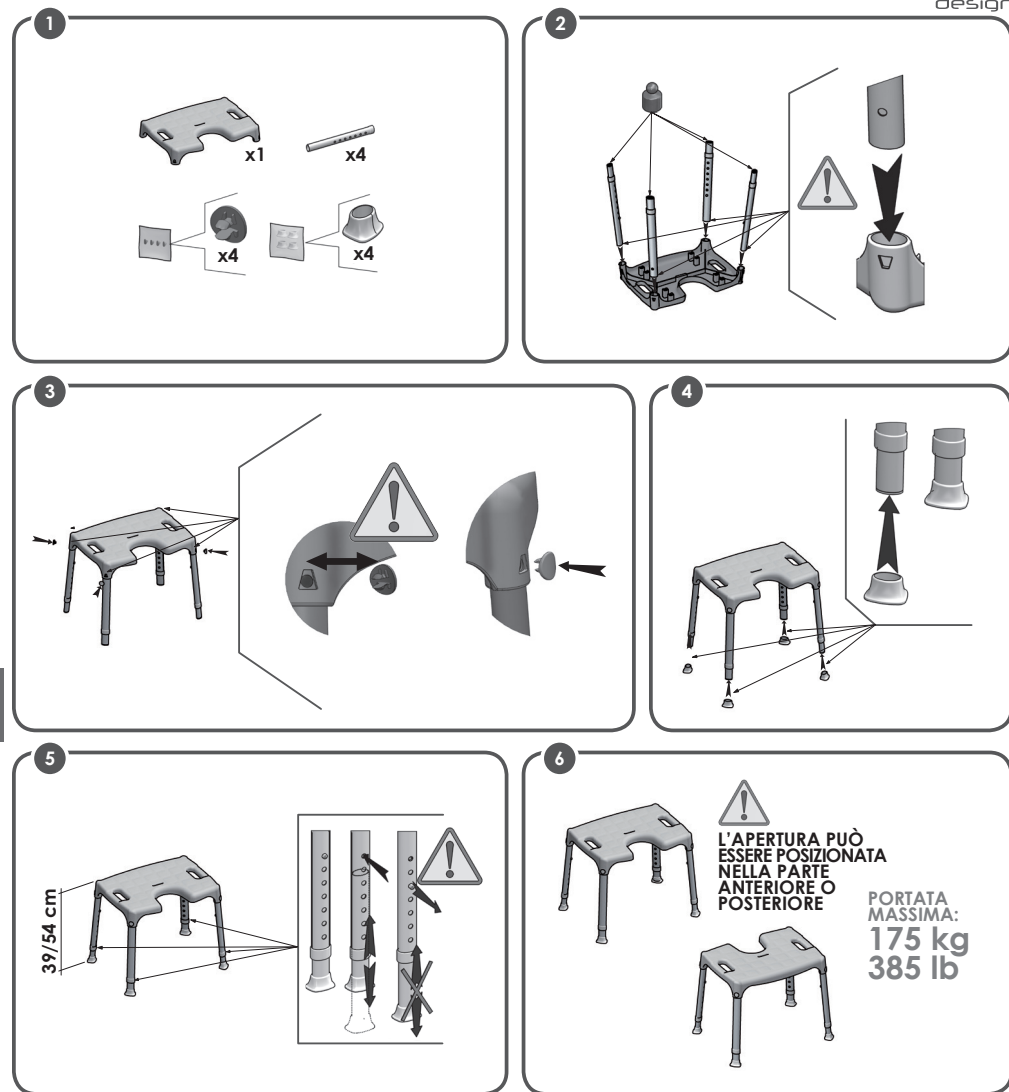

MADE IN ITALY

**INTENDED USAGE:**

The Shower chair with frontal opening allows the user an increase in independence during the shower stage of daily personal hygiene, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risks. The non slip rubber feet ensure grip with the floor, and the versions provided with the height adjustable legs allow the user to change easily the total height according to their requirements. In addition, the shower chair with customised height can be used with different length settings between the front and rear legs. In particular, the front legs can be lower than the rear ones: this allows the user to keep a more correct posture while taking a shower, as well as to facilitate standing and sitting procedures. Due to its flexibility, the shower chair can be positioned even on a bumpy and irregular floor, like those typical of many shower trays. The opening on the seat make the personal care easier and can be positioned either on the front side or in the rear side, depending on the user needs. The shower chair can be easily moved due to its light weight.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The Shower chair with frontal opening is aimed to elderly people, wheelchair users, people with reduced mobility of lumbar, knee or hip, and to all those who have difficulty to maintain the standing position during the shower stages of daily personal hygiene. The user is required to have autonomy of balance during the sitting and standing procedures as well as to have adequate ability to keep sitting. The shower chair must not be used if the user has problems related to balance or perception disorders.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceed.
- Before every use, be sure the shower chair is correctly assembled in a stable position.
- The shower chair can be used only on surface that are free from obstacles.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting process.
- Do not swing on the shower chair, this may lead to slipping, overturning or subsidence of the legs. Always keep the shower chair on its 4 legs.
- Do not modify the shower chair and its components in any way.
- Do not use the shower chair if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- After use, the shower chair should be removed from the shower tray to avoid any obstruction.
- Do not use the shower chair for a different purpose from the intended one.
- The shower chair must not be stored outdoors.

MAINTENANCE INFO:

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or non aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

Alternatively, the product can be cleaned in domestic dishwashers at the maximum temperature.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized. Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

INCIDENT REPORTING:

If there was a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at info@kdesign-group.com and the responsible authority in your country.

