



UM-KINGPWSL-KD Rev. 2 as of 2022/05

MADE IN ITALY



DESTINAZIONE D'USO:

Il Sedile ribaltabile da muro con gambe è progettato per essere usato sotto la doccia, consentendo all'utente migliore autonomia, riducendo la fatica muscolare dovuta alla posizione eretta così come rischi di scivolamento e lesioni. Il sistema di piegamento rende il prodotto idoneo anche per bagni di piccole dimensioni e permette all'utente di mantenere il piatto doccia ordinato e libero da ostacoli senza sforzo.

INDICAZIONE E CONTROINDICAZIONI:

Il sedile ribaltabile da muro con gambe è pensato per anziani, utenti in sedia a rotelle, persone con mobilità ridotta di zona lombare, anche o ginocchia e a tutti coloro che possono avere difficoltà a mantenere la posizione eretta durante la doccia. Durante l'uso è necessario che l'utente abbia sufficiente autonomia durante le fasi di alzata e di seduta e un'adeguata capacità di mantenere la seduta. L'utilizzo del sedile da muro non è raccomandato in caso di disturbi della percezione o problemi di equilibrio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Il peso massimo utente indicato nelle istruzioni non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi che la sedia da muro sia assemblata correttamente.
- Durante l'assemblaggio, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale.
- Il rischio di lesioni alla dita potrebbe aumentare durante il processo di assemblaggio.
- Non modificare la sedia da muro e i suoi componenti in alcun modo.
- Non usare il sedile da muro se danneggiato. Cricche e deformazioni potrebbero fortemente influire sull'utilizzo in sicurezza del dispositivo.
- Dopo l'utilizzo, il sedile da muro dovrebbe essere ripiegato nella sua configurazione di non utilizzo.
- Non usare il sedile da muro per fini differenti da quelli previsti.
- Il sedile da muro non deve essere riposto all'aperto.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle fasi di pulizia e igienizzazione. Per poter garantire un adeguato livello di igiene, l'utente deve ripetere queste operazioni prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti. Per le operazioni di pulizia e igienizzazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Indossare guanti.
2. Rimuovere lo sporco più evidente prima di procedere con la disinfezione più approfondita.
3. Usare acqua o un detergente non aggressivo per la pulizia.
4. Asciugare con un panno asciutto e pulito.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:


Il prodotto è idoneo al riutilizzo da parte di altri utenti. Prima del riutilizzo da parte di altri, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, deve essere controllato da rivenditori qualificati.


PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:

Se il dispositivo dovesse essere coinvolto in un incidente, contattare il produttore all'indirizzo info@kdesign-group.com e l'autorità competente del proprio paese.

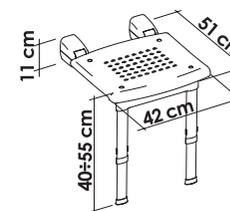

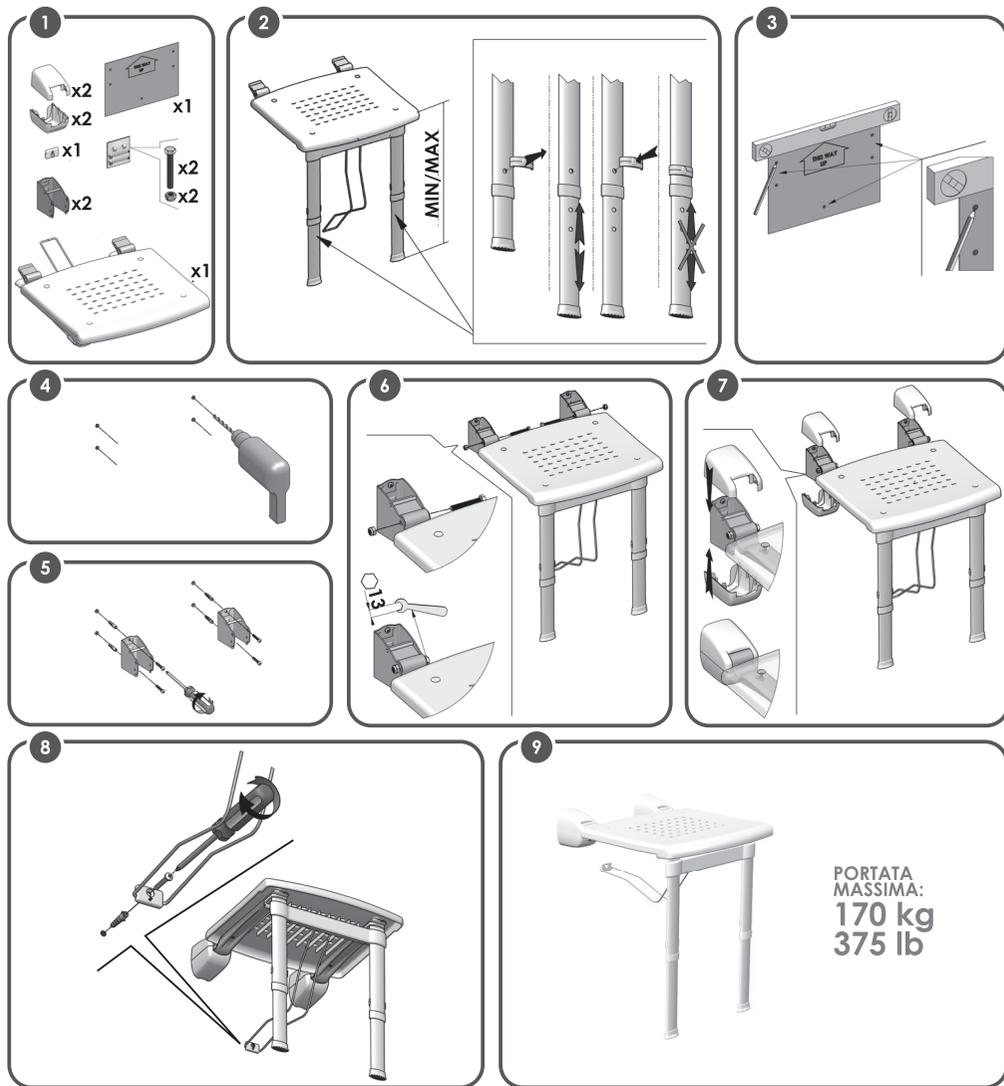

MADE IN ITALY



INTENDED USAGE:

The *Lift-up wall mounted seat with legs* is meant to be used while showering, allowing the user to achieve greater independence, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risks. The folding mechanism make these products suitable even for small bathrooms and help the user to keep the shower tray tidy and free from any obstacle without effort.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The lift-up wall mounted seat with legs is aimed to elderly people, wheelchair users, people with reduced mobility of lumbar, knee or hip, and to all those who have difficulty to maintain the standing position during the shower stages of daily personal hygiene. The user is required to have autonomy of balance during the sitting and standing procedures as well as to have adequate ability to keep sitting. The lift-up wall mounted seat must not be used if the user has problems related to balance or perception disorders.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceed.
- Before every use, be sure the lift-up wall mounted seat is correctly assembled.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting process.
- Do not modify the lift-up wall mounted seat and its components in any way.
- Do not use the lift-up wall mounted seat if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- After use, the lift-up wall mounted seat should be folded in its non-use configuration.
- Do not use the lift-up wall mounted seat for a different purpose from the intended one.
- The lift-up wall mounted seat must not be stored outdoors.

MAINTENANCE INFO:

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or non-aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized.

Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

INCIDENT REPORTING:

If there was a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at info@kdesign-group.com and the responsible authority in your country.

